

# Fiche Technique

## Lancettes sécurité BD Microtainer® Contact

Références : 366592 – 366593 – 366594



### Descriptif

Lancettes sécurité BD Microtainer® Contact avec aiguille ou lame, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.

### Caractéristiques générales

<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aiguille ou lame (1)</b> Acier inoxydable de grade chirurgical</li><li>• <b>Protection de l'aiguille/ lame (2)</b> Polypropylène</li><li>• <b>Corps de la lancette (3)</b> Polypropylène</li><li>• <b>Gaine de contact et guidage (4)</b> Polyéthylène</li><li>• <b>Ressort de rétraction (5)</b> Acier inoxydable</li><li>• <b>Élément de non réactivation (6)</b> ABS</li><li>• <b>Support de fixation de l'aiguille/lame (7)</b> Polystyrène</li><li>• <b>Ressort d'activation (8)</b> Acier inoxydable</li><li>• <b>Corps de la lancette (9)</b> Polypropylène</li></ul>
------------------	---

**Fabricant**

- BD Franklin Lakes NJ 07417 (USA)  
Certification ISO 14385 : 2003 par le NSAI (n° CM 19.2137)

**Pays d'origine**

- Pologne

**Représentant européen**

- BD Belliver Industrial Estate – Plymouth PL6 7BP (UK)

**Stérilité**

- Niveau de stérilité : 10<sup>-6</sup> SAL (Sterility Assurance Level= Niveau d'Assurance de Stérilité)
- Mode de stérilisation : par irradiation (rayon gamma) conforme à la norme Internationale EN ISO 11137.

**Marquage CE**

- Dispositif Médical – Classe IIa (règle 6 – Annexe IX)  
Directive européenne 93/42/CEE  
Certificat de marquage CE n°252.189 délivré par le NSAI  
(National Standards Authority of Ireland, n° 0050)  
*Disponible sur demande*



**Conservation**

- Durée de vie du produit : 2 ans

Présence de latex	• Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec)	• Non
Présence de Phtalates	• Non
Présence de produits d'origine animale	• Non

# Fiche Technique (suite)

## Caractéristiques spécifiques


Référence de commande	<b>366592</b>	<b>366593</b>	<b>366594</b>
Diamètre (aiguille) ou dimensions (lame)	Aiguille 30G (0.31 mm)	Aiguille 21G (0.81 mm)	Lame Largeur 2 mm x prof 1.5 mm
Profondeur de la ponction	1.5 mm	1.8 mm	2 mm
Code Couleur	Violet	Rose	Bleue
Applications	Glycémie capillaire 1 goutte de sang	Glycémie capillaire pour peau épaisse Tubes Micro- hématocrite	Tubes BD Microtainer®
Emballage unitaire	Néant (n° de lot indiqué sur le produit unitaire)		
Conditionnement	Boite cartonnée distributrice, contenant 200 lancettes		
Sur-conditionnement	Carton de 10 x 200 lancettes (2000 lancettes)		
Unité de vente	Boite de 200 lancettes		

## Etiquetage

*Etiquetage de type symbolique (norme EN 980)*

	<i>Boite cartonnée de 200 unités</i>	<i>Carton de 10 x 200 unités</i>
Nom du fabricant et distributeur, unité, adresse, pays de fabrication	x	x
Nom du représentant européen	x	x
Marque déposée Microtainer	x	x
Nom et référence du produit	x	x
Visualisation du produit, code couleur, dimensions de la lame	x	x
Stérile et mode de stérilisation	x	x
Marquage CE et n° de l'organisme certificateur (0050=NSAI)	x	x
N° de lot, date de péremption, produit à usage unique	x	x
Conditions de conservation avant utilisation	x	x
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage	x	x
Application	x	
Recommandations d'utilisation sous forme graphique	x	
Insert (Précautions universelles et correspondance des symboles utilisés)	x	
Code à barres primaire (GS1-128) : identification produit	x	x
Code à barres secondaire (GS1-128) : quantité, date de péremption ; lieu de fabrication, n° de lot		x

## Recommandations d'utilisation

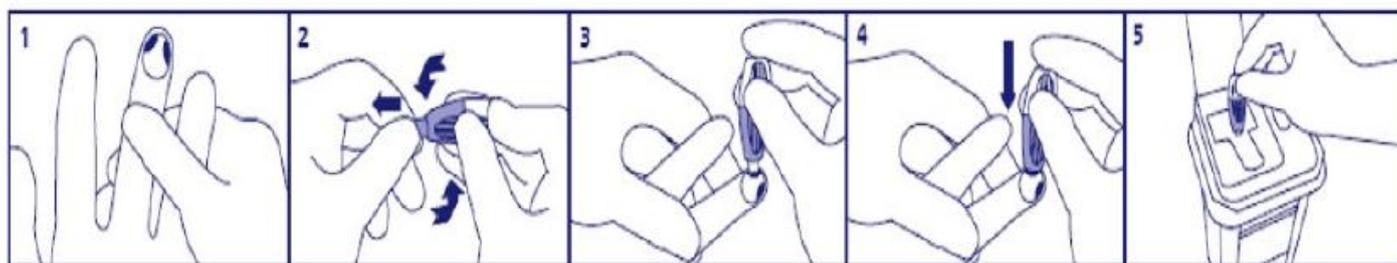

PC4\_Lancette / Mars 2013