


Défibrillateur AED 3

Reference:
8501-001202-02

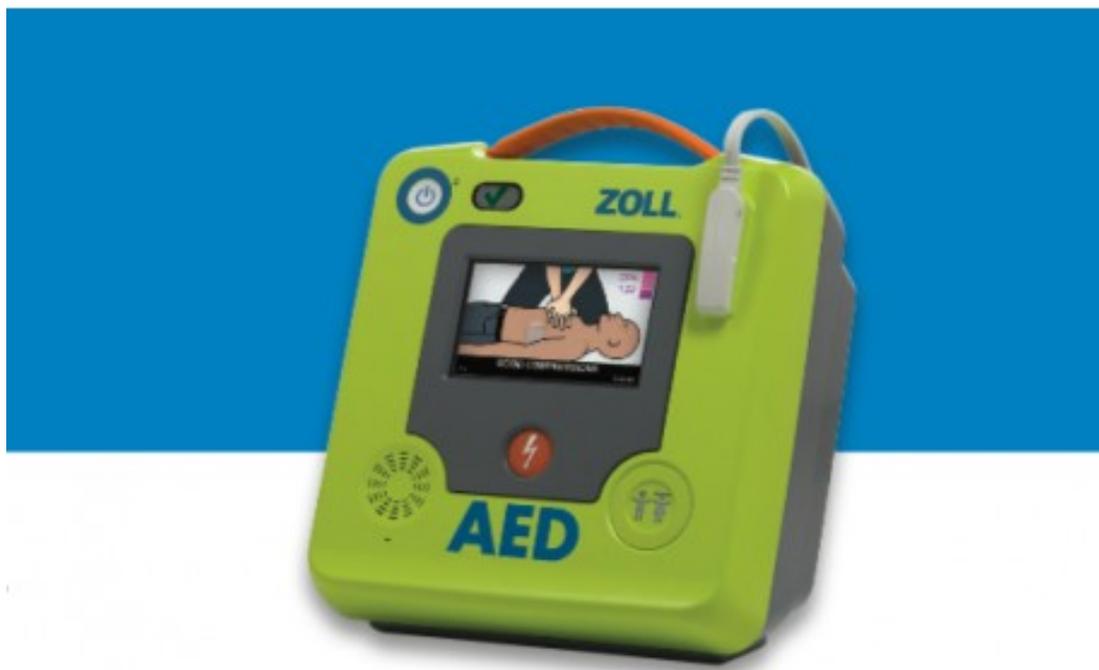

Prix

2 694,00 € TTC

Retrouvez ici notre **Défibrillateur AED 3**.

En mode automatique, le défibrillateur délivre le choc sans manipulation humaine.

En mode semi-automatique, le défibrillateur indique qu'il faut délivrer le choc et une personne devra donc appuyer sur le bouton prévu à cet effet.

Malgré le flou juridique actuel sur l'obligation d'équiper un ERP, il est néanmoins fortement conseillé de le faire.

Description

Les résultats sont là : sans réaction appropriée, appel immédiat des urgences dès l'arrêt cardiaque, pratique immédiate du massage cardiaque et utilisation rapide d'un défibrillateur efficace, les chances de survie sont presque nulles alors qu'elles dépassent 50% si toutes ces conditions sont respectées.

Le défibrillateur automatique est à la disposition du grand public depuis que le gouvernement français, par le décret du 4 mai 2007, autorise "toute personne non médecin" à utiliser l'appareil sans encourir la moindre responsabilité en cas d'échec. Ce décret est un des éléments qui répond à l'immense problème de santé publique que représente le décès par arrêt cardiaque de quelques 45 à 50 000 personnes chaque année.

Lorsqu'un arrêt cardiaque survient, la meilleure chose à faire est une RCP (Réanimation Cardio Pulmonaire) immédiate avec un secouriste en possession d'un défibrillateur automatisé (DAE).

Le **défibrillateur AED 3** fournit une assistance détaillée à la RCP grâce à la technologie **Real CPR Help améliorée**:

Images en couleur, minuteur de cycles RCP, messages vocaux et textuels, évaluation de la RCP en temps réel.

Grâce au système d'analyse **RapidShock**, il ne lui faut que 5 secondes pour infliger un choc en cas de nécessité, ce qui améliore les chances de survie.

La **réanimation pédiatrique** est intégrée. L'électrode universelle CPR Uni-padz (durée de vie 5 ans) permet au secouriste de traiter indifféremment une victime adulte ou enfant en activant tout simplement le mode enfant sur le défibrillateur.

La **connectivité Wi-Fi** permet de transmettre le statut disponibilité du défibrillateur AED 3, prévient de l'échec d'un auto test hebdomadaire et envoie des courriels d'alerte.

Livré avec :

- Une batterie
- 1 électrode universelle CRP Uni padz (adulte ou enfant)
- Pluc Trac
- 1 kit de secours : gants sans latex, masque de RCP, rasoir, serviette en papier, lingette
- Un guide pour utilisateur

Garantie 6 ans.

Suite à la loi adoptée au Sénat le 13 juin 2018, la maintenance du défibrillateur sera bientôt obligatoire.

Fiche technique

Alimentation: Batterie / CPR Uni padz / Pluc Trac

Colisage: 1

Couleur: Vert

Dimensions: 12,7 x 23,6 x 24,7 cm

Hauteur: 12,7 cm

Largeur: 23,6 cm

Poids (kg): 2,5 kg (avec batterie)

Profondeur: 24,7 cm

Puissance: Batterie

Protocole de sécurité: WPA 1, WPA 2, WPA Personal, WPA Enterprise

Sans fil: 802.11 a/b/g/n

Caractéristiques

Version: Semi-automatique, Automatique

Images du produits

