

Zetuvit® E Non stérile

Pansement absorbant



Référence	Taille ou dimensions
413860	10 x 10 cm
413861	10 x 20 cm
413862	15 x 20 cm
413863	15 x 25 cm
413864	20 x 20 cm
413865	20 x 25 cm
413866	20 x 40 cm

Produit


Pansement absorbant non stérile à usage unique, conforme, recouvert d'un nontissé afin d'éviter l'adhérence.
Conditionné non plié.
Dos hydrophobe qui évite le relargage de liquide, reconnaissable par un liseré bleu.

Indications / Classification

Pour le revêtement secondaire des plaies et la protection mécanique (rembourrage et amorti).
Protection des plaies en cas de plaie aiguë et chronique.
Utilisé comme barrière mécanique et pour l'absorption des fluides corporels (exsudat, sang, pus).

Zetuvit® E Non stérile est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

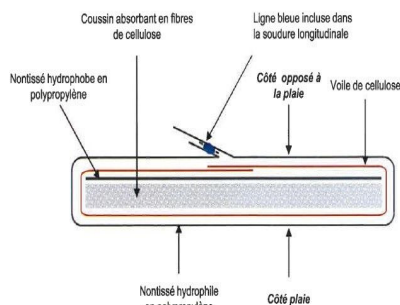

Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert à l'arrière d'un nontissé hydrophobe et perméable à l'air. Un voile de cellulose permettant la distribution des sécrétions entoure cette partie centrale. Le tout est enveloppé dans un nontissé non adhérent et hydrophile.

Le dos est caractérisé par un fil de couleur bleue.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 50 g/100 cm² de coussin absorbant (selon norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2).

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
413860	10 x 10 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 12,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm env. Surface utile d'absorption : 100 cm ² env. Poids du pansement : 4 g env.
413861	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 22,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm env. Surface utile d'absorption : 200 cm ² env. Poids du pansement : 8 g env.
413862	15 x 20 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 22,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env. Surface utile d'absorption : 300 cm ² env. Poids du pansement : 12 g env.
413863	15 x 25 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 27,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 25 cm env. Surface utile d'absorption : 375 cm ² env. Poids du pansement : 15 g env.
413864	20 x 20 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 22,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 20 cm env. Surface utile d'absorption : 400 cm ² env. Poids du pansement : 16 g env.



413865	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 27,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm env. Surface utile d'absorption : 500 cm ² env. Poids du pansement : 20 g env.
413866	20 x 40 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 42,4 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm env. Surface utile d'absorption : 800 cm ² env. Poids du pansement : 31 g env.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Conditionnement en boîte pour une distribution facilitée dans les services.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
413860	10 x 10 cm	50	12	32
413861	10 x 20 cm	50	4	56
413862	15 x 20 cm	50	4	35
413863	15 x 25 cm	50	3	36
413864	20 x 20 cm	50	4	28
413865	20 x 25 cm	50	4	16
413866	20 x 40 cm	30	4	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
413860	10 x 10 cm	138 x 125 x 210 mm	564 x 387 x 224 mm	1200 x 800 x 1942 mm
413861	10 x 20 cm	221 x 210 x 136 mm	556 x 233 x 224 mm	1200 x 800 x 1940 mm
413862	15 x 20 cm	310 x 221 x 136 mm	556 x 233 x 324 mm	1200 x 800 x 1768 mm
413863	15 x 25 cm	310 x 275 x 137 mm	423 x 322 x 289 mm	1200 x 800 x 1879 mm
413864	20 x 20 cm	410 x 225 x 135 mm	552 x 237 x 424 mm	1200 x 800 x 1841 mm
413865	20 x 25 cm	410 x 260 x 142 mm	561 x 296 x 437 mm	1200 x 800 x 1893 mm
413866	20 x 40 cm	411 x 206 x 177 mm	421 x 361 x 427 mm	1200 x 800 x 1853 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

Le produit ne doit pas être découpé.

Conseils d'utilisation

La face arrière (face opposée à la plaie) est reconnaissable par son ruban de couleur bleue.