

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL

DISPOSITIF MOULÉ EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

MATÉRIAUX

80
kg/m³

Mousse
Polyuréthane
viscoélastique
à mémoire de
forme moulée



Enduction
de Polyuréthane
anallergique sur
jersey polyester



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Lavage support :



(NE PAS IMMERGER)

Lavage housse :



(POSSIBLE JUSQU'À 90°)

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL (Déhousé)



TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :

- ↳ Anallergique et traité antibactérien, antimicro-bien, antifongique.
- ↳ Lutte contre les frictions et cisaillements.
- ↳ Souple et doux au toucher (confort).
- ↳ Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- ↳ Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
- ↳ Lavables jusqu'à 90°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- ↳ Traitement d'ignifugation.
- ↳ En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL (Houssé)





MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

- ↳ Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec la mousse.
- ↳ Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée.
- ↳ Confort accru et meilleur maintien du patient.



- ↳ C'est le support universel par excellence : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles...
- ↳ Possibilité d'utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.
- ↳ Facilité de mise en place pour l'aidant.
- ↳ Utilisé seul ou en association.

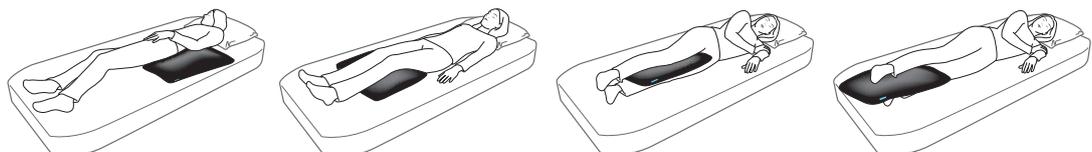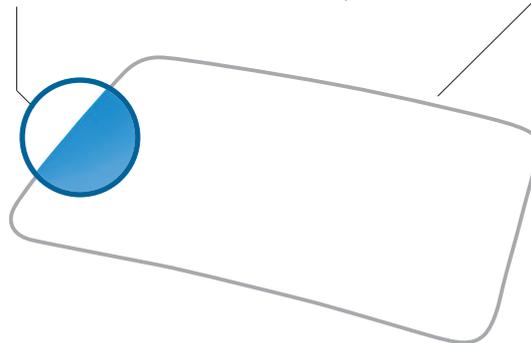

GARANTIE **2**
ANS

Référence	Modèle	Dimensions
P914L1HW	Dispositif de positionnement universel livré avec 1 housse	60 x 40 x 13 cm