



# DOSSERET

DOSSERET MOULÉ EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MULTIORTANCE

ENVIRONNEMENT  
FAUTEUIL

## INDICATIONS

Amélioration du positionnement et du confort du patient dans son fauteuil. Prévention de l'instabilité sagittale (glisser-avant).

DOSSERET




## MATÉRIAUX

80 kg/m<sup>3</sup>




Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée

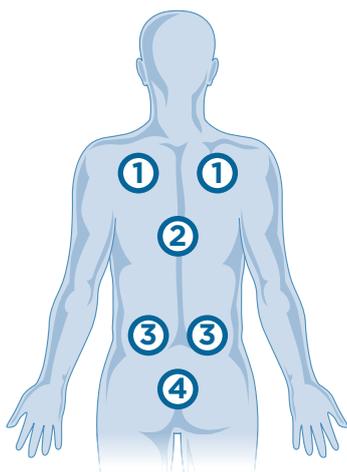


- ① OMOPLATES/ÉPAULES
- ② ZONE VERTÉBRALE
- ③ ZONE LOMBAIRE
- ④ ZONE SACRO-COCYGIENNE




SANS DOSSERET

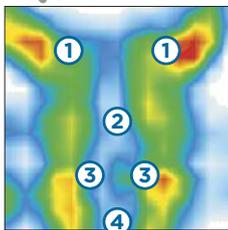

AVEC UN DOSSERET SIMPLE MOUSSE

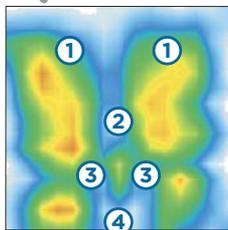

AVEC LE DOSSERET SYST'AM®

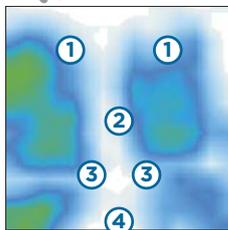

EXISTE EN PACKS THÉRAPEUTIQUES FAUTEUILS

↳ Voir page 44



MODÈLE		REF	Hauteur	Largeur	Épaisseur (max)
Dossieret mousse viscoélastique multiortance	taille Small	P951DS1HW	44 cm	39 cm	9 cm
	taille Standard	P951D1HW	49 cm	44 cm	9 cm
	taille Large	P951DL1HW	49 cm	50 cm	10 cm

HOUSSE POLYMAILLE®

CE GARANTIE 2 ANS

02/2016

**DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE DU COUSSIN D'AIDE  
À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE**

- ↳ Soulage de manière importante les points d'appuis de la zone vertébrale.
- ↳ Diminue le risque d'apparition d'escarre sacro-coccygienne du fait d'une diminution de l'instabilité sagittale («glisser-avant»).
- ↳ Réduit les effets de cisaillements sur le plan sacro-fessier grâce à un meilleur maintien postural du bassin.

**FORME ANATOMIQUE SPÉCIFIQUE**

- ↳ Respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d'une syphose (sillon vertébral).
- ↳ Respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.

**AUGMENTATION DU CONFORT  
DU PATIENT AU FAUTEUIL**

- ↳ Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale, souvent douloureuse, en particulier dans les cas d'utilisation intensive.

**PRINCIPE DE MULTIORTANCE**



- ↳ La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

**ZONE BLANCHE :**

Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d'empreinte morphologique.

**ZONE BLEUE :**

Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points d'appuis à risques et accentue la stabilité latérale.

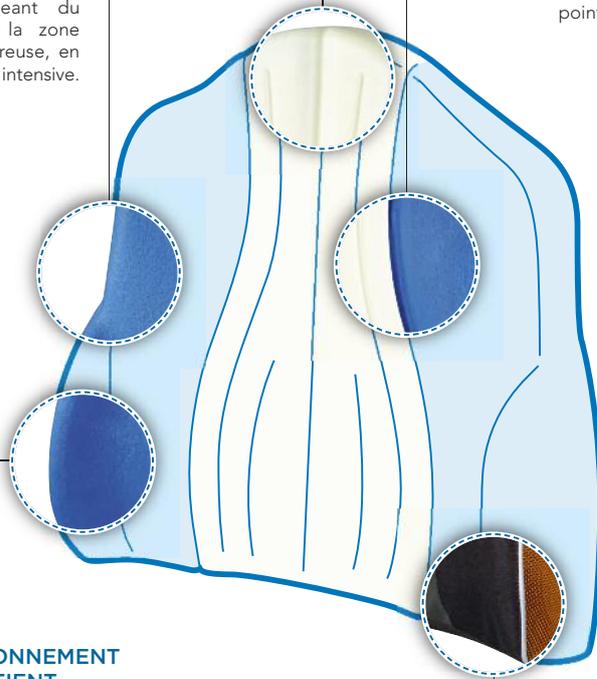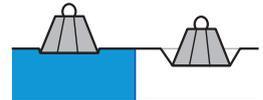**AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT  
ET DE LA STABILITÉ DU PATIENT**

- ↳ Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le glisser-avant (instabilité sagittale) et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu'en institution.
- ↳ Boudins latéraux assurant une diminution de l'instabilité latérale, fréquente chez les sujets handicapés.

**HOUSSE SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE**

- ↳ En regard de la zone dorsale, tissu de type enduction polyuréthane bi-extensible hautement respirante et imperméabilisée.



- ↳ Tissu de type toile enduite souple, résistante à l'abrasion et aux contraintes d'une utilisation quotidienne intensive.



- ↳ Tissu technique hautement résistant positionné en regard des zones à forte contrainte d'abrasion.

**SYSTÈME  
D'ACCROCHE UNIVERSELLE**

- ↳ S'adapte à la plupart des modèles de fauteuil.



## PACKS THÉRAPEUTIQUES FAUTEUIL SYST'AM®


Référence	Désignation	Taille du coussin	Taille du dossieret
<b>PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX® Standard &amp; Dossieret</b>			
PKCOUDOS10	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	36 x 36 x 8 cm	Small (44 x 39 x 9 cm)
PKCOUDOS15	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	38 x 38 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS11	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 x 42 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS16	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 x 46 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS12	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 x 42 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS13	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS14	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	51 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
<b>PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX®+ (technique) avec Butée pelvienne &amp; Dossieret</b>			
PKCOUDOS01	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	42 x 42 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS02	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	45 x 42 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS03	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	45 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)

### COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PACK THÉRAPEUTIQUE FAUTEUIL SUR-MESURE


↳ Grâce au **conditionnement dorénavant unitaire de nos dossierets**, vous pouvez à présent aisément (en commandant les références coussins et dossierets séparément) composer votre **Pack Thérapeutique sur-mesure !**




LARGEUR DU FAUTEUIL

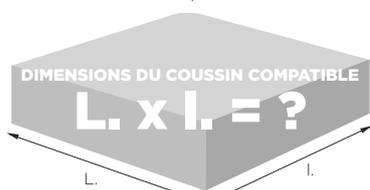


**DOSSERET  
Small**  
P951DS

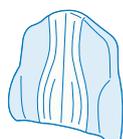

**DOSSERET  
Standard**  
P951D

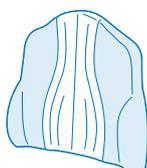

**DOSSERET  
Large**  
P951DL

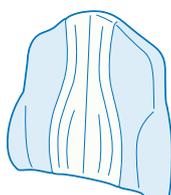

CONSULTEZ LE TABLEAU  
DES COMPATIBILITÉS  
COUSSINS/DOSSERETS  
PAGE SUIVANTE



**POLYFORM® Mixte**  
P314C



**DUOFORM®**  
P341C



**VISCOFLEX®**  
P361C




**VISCOFLEX®  
avec butée**  
P361C/P



**VISCOFLEX®+**  
P361C/A



**POLYAIR® 60**  
P301C

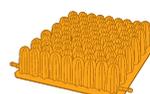

**POLYAIR® 100**  
P302C



ENVIRONNEMENT  
FAUTEUIL

LARGEUR DU FAUTEUIL (cm)	30/32	34/36	38	40				43/44		45		48/50		55	60					
TAILLES DE COUSSINS DISPONIBLES (cm)	32 x 32 cm	36 x 36 cm	38 x 38 cm	38 x 43 cm	40 x 40 cm	40 x 43 cm	40 x 46 cm	42 x 42 cm	42 x 46 cm	43 x 43 cm	45 x 42 cm	45 x 43 cm	45 x 46 cm	46 x 40 cm	46 x 46 cm	48 x 43 cm	51 x 46 cm	51 x 50 cm	56 x 46 cm	61 x 50 cm

Correspondance TAILLE - MODÈLE COUSSINS


<b>POLYFORM® Mixte</b> P314C					•							•									
<b>DUOFORM®</b> P341C		•						•	•		•		•				•				
<b>VISCOFLEX®</b> P361C (●) P361C/L (●)		•	•		•			•	•		•	•	•			•	•	•			
<b>VISCOFLEX®+</b> P361C/A	•	•	•	•	•			•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•
<b>VISCOFLEX®+</b> avec butée P361C/P								•			•		•								
<b>POLYAIR® 60</b> P301C		•			•	•	•			•				•	•		•	•			
<b>POLYAIR® 100</b> P302C					•	•	•			•				•	•		•	•			

COMPATIBILITÉ DES TAILLES COUSSINS - DOSSERETS

<b>Dossieret SMALL</b> P951DS1HW	+	+	+	+																	
<b>Dossieret STANDARD</b> P951D1HW (+)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
<b>Dossieret LARGE</b> P951DL1HW									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

RECOMMANDATIONS

↳ Prévoir une assise de profondeur + 3 cm si emploi d'un dossieret

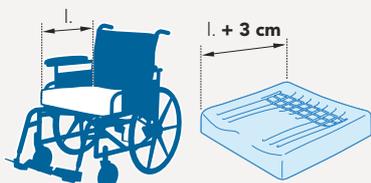

↳ Toujours poser le dossieret sur le coussin

